

キャンペーン

2019年11月21日(木) ~ 2020年1月20日(月)

リテナークリン ViVa⁺ (美歯)

リテナークリンViVa⁺
8箱お買い上げで

特別価格

にてご提供いたします




キレイな歯並びには
キレイなお口環境を。
毎日のお手入れにより、
さらに効果が増します。



白元アース

クリーンメカニズム トリプルパワーでスッキリ洗浄!

※イメージ図

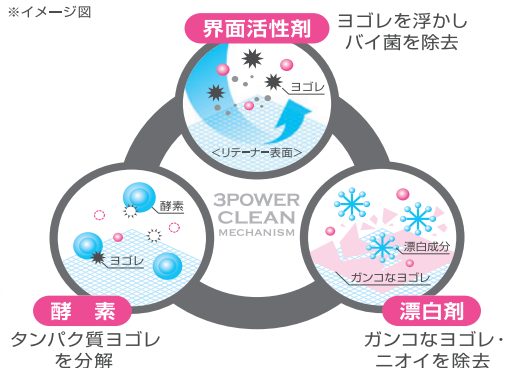



なぜリテナーをキレイにしなければいけないの？

その理由は

- ❶ ヨゴレが溜まりやすい。
- ❷ バイ菌が繁殖しやすい。
- ❸ 虫歯になりやすい。
- ❹ 口臭が臭くなる。

だからなの！



リテナーは専用の洗浄剤で洗うのがベスト！

その理由は

- ❶ リテナーを傷つけない
- ❷ 目に見えないヨゴレやバイ菌もノックアウト
- ❸ 簡単・手軽

だからなの！

ママからの一言

歯並びはキレイ！でも虫歯だらけ・・・ということにならないように、毎日きちんとお手入れをすることが欠かせません。でもリテナーはとても傷がつきやすいので、研磨剤入りの歯磨き粉を使ったり、自然歯用の硬い毛先の歯ブラシを使ってゴシゴシするのは逆効果です。正しい知識を持って、楽しみながら歯列矯正ライフを送って下さい。



リテナークリーンVivaの3大特長



3大特長 その1 Cool

フレッシュなピンクグレープフルーツの香りとクールなミントの香りでお口爽やか！



3大特長 その2 Easy

3ステップで簡単洗浄！

※使用方法をご参照下さい。




3大特長 その3 Clean

ニオイもバイ菌もクリーンアップ！

- ❶ 界面活性剤の「浮かし」効果
- ❷ 漂白剤の「除去」効果
- ❸ 酵素の「分解」効果

クリーンメカニズム トリプルパワーでスッキリ洗浄！

※イメージ図

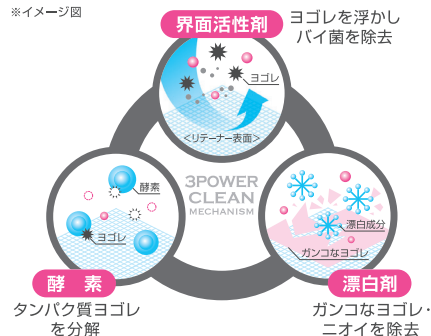

使用方法

step.1



約150mLの水またはお湯(40~50℃)に、本品を1錠入れます。

水温が低いとまれに発泡しにくくなることもあるため、お湯をお薦めします。

step.2



すぐにリテナーを浸してください。

ふつうのヨゴレの洗浄は5分程度、ひどい場合は浸け置きが効果的です。

step.3



洗浄後は水でよくすすいでください。

溶液は毎回お取替えください。同様の洗浄方法でリテナーレトリーバーも洗浄できます。

成分

- ・漂白剤 (過硫酸塩、過ホウ酸塩)
- ・アニオン系界面活性剤
- ・酵素
- ・炭酸塩
- ・クエン酸
- ・結合剤
- ・流動改善剤
- ・香料
- ・色素

液性

- ・中性

内容量

- ・2.8g × 60錠

本紙に掲載されている価格は2019年11月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

販売業者



株式会社モリムラ

株式会社モリムラ

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪 1-28-10-3F
TEL.03-5808-9350 FAX.03-5808-9351
http://www.morimura-jpn.co.jp

製造業者



白元アース株式会社

お問い合わせ
〒123-0852 東京都足立区関原 2-42-1
TEL. 03-5845-5860 FAX. 03-3887-5350

●製品に関するご用命は