

# ergo PROX

# MORIMURA

## エルゴプロックス

デュアルヘッドラバーブラシ

抜歯空隙の両隣在歯の  
ブラッシングに！

パーシャルデンチャーの鉤歯に！

インプラントの埋入部位の  
両隣在歯に！

ブリッジ装着前の両隣在歯に！

孤立歯や最後臼歯遠心面に！



## エルゴプロックス



### 仕様

ヘッドサイズ：  
横 22mm × 縦 8mm  
毛の長さ：3mm

柄の材質	ポリプロピレン
毛の材質	熱可塑性エラストマー
耐熱温度	80° C

1本入

エルゴプロックスを用いた  
ブラッシング動画は  
モリムラホームページから

※耐久性のあるエラストマーを使用しています。  
3ヶ月ごと、もしくは毛先が摩耗したら  
新品に交換してください。





## ブラッシングが困難な 抜歯空隙の両隣在歯




通常の歯ブラシでは、両隣在歯の近遠心面に毛先が届きにくく、ワンタフトブラシや歯間ブラシなどのブラッシングは、患者様が技術を習得したとしても、継続的に使用しなくなることがあります。



プラークの除去が不十分となりますと、  
カリエスや歯周病の進行につながる  
可能性があります。

- ブラッシングが苦手の患者様
- 高齢で手が動きにくくなっている患者様
- 訪問歯科、介護施設、病院などでブラッシングを介助する歯科医療従事者、介護者などに！

近遠心面および歯頸部にフィットする角度となっているデュアルヘッドラバーブラシは、器用でない患者様でも、直感的に効果的なプラーク除去を行うことができます。

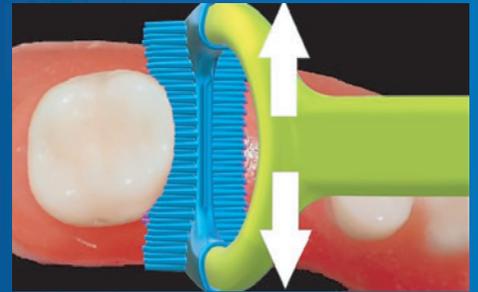

- 握りやすい幅広ハンドルです。
- 洗いやすく乾かしやすい、衛生設計の歯ブラシです。

### 使用方法

- ①毛先に少量の歯磨材をつけます。
  - ②毛先を歯と歯肉の境目にフィットさせて、左右に小刻みに動かしてブラッシングします。
  - ③ブラッシング後は洗口してください。
- ※使用後は、よく水洗いして乾燥させてください。

本紙に掲載されている価格は2026年3月23日のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は