


困難な

矯正治療中の

歯間部清掃を簡単に！

デンタルフロス用ホルダー

フロスフィッシュ

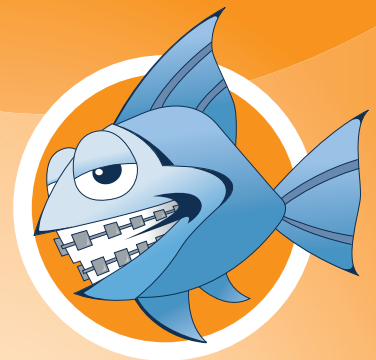

Flossfish.com




ご使用中の
デンタルフロスで
歯間部清掃を
簡単に行うことが
できます！


便利

簡単


時間
短縮

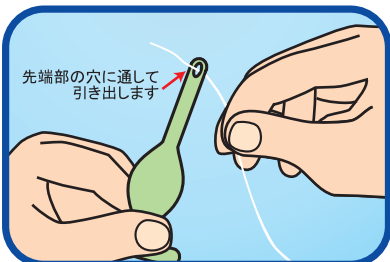

先端部の穴に通して
引き出します。

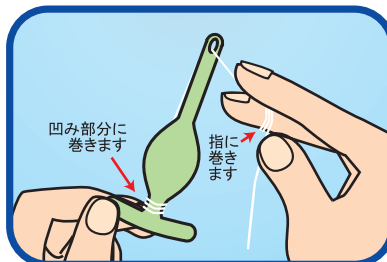

デンタルフロスの片端はフロス
フィッシュの凹み部分に巻き、
穴に通して引き出した片端は指
に巻きます。

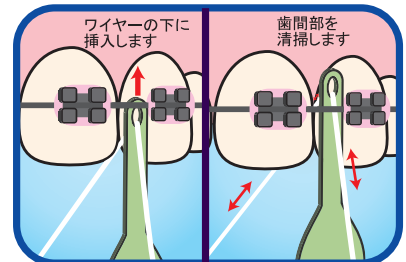

フロスフィッシュ先端部を、
ブラケット間のワイヤーの下に
挿入し、歯間部を清掃します。



デンタルフロス用ホルダー

フロスフィッシュ アソート
5個入×12袋入



1袋5個入

内容：ピンク、ブルー、オレンジ、
グリーン、パープル 各1個

形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

輸入元



株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

販売元



株式会社モリムラ

本社：〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所：〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-3
レーベンハウス江坂405号
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は