


ライト付歯ブラシ SEE CLEAN



シープラスクリーンで、
より良いケア、より良い健康、より良い生活

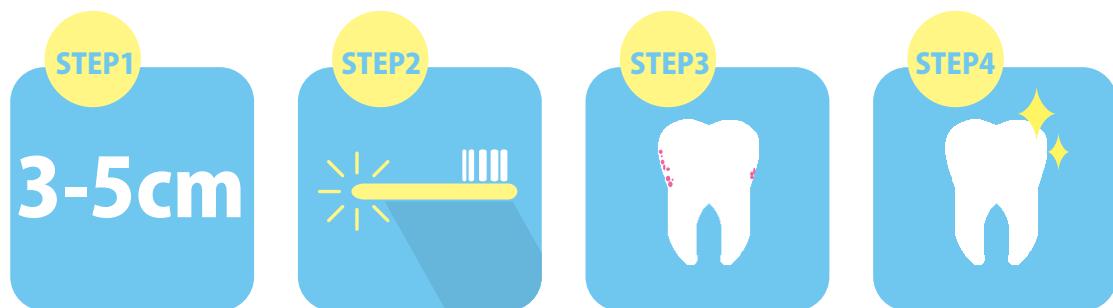


- STEP1** ハンドルを持ち、ライトを歯から3～5cmの距離に保ちます。
- STEP2** ライトのスイッチを押します。
- STEP3** 鏡を見て、ライトで赤色蛍光反応したプラークの付着部位を確認します。
- STEP4** 歯ブラシで、ブラッシングします。
- OK** プラークが除去できたら完了です。

01

Plaque
detection

プラーク識別ライト

プラーク染色液を使用しなくても
シーブラスクリーンのライトを歯に照射することにより
蛍光反応したプラークがピンク色に見えます*

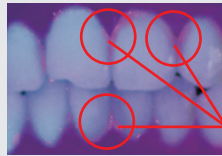

プラーク

※新しいプラークは蛍光反応しない場合がありますが通常どおりブラッシングを行ってください

02

0.01
mm敏感な歯と歯肉のための
0.01mmスリム&ソフト毛

0.01mm スリム毛

0.01mmスリム&ソフト毛のため
簡単に歯肉溝に深く到達し
歯と歯肉に
快適なブラッシングを
行うことができます

03

Charcoal



炭を練り込んだ毛

汚れやニオイの吸着力があると
いわれている
炭の粒子を練り込んで
毛のため
効果的にブラッシングを
行うことができます



↑詳しい情報はコチラ

pink, green,
purple, blue
4 Color

04

Water
proofご使用後のお手入れに
防水性能 IPX7*

歯ブラシの水洗ができる
防水性能を有しています

※IPX7:一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に
水没しても内部に浸水しない防水性能

※写真は防水性能を有していることを示すためにライトを点灯させながら水洗していますが、
日常のお手入れでは、ライトを点灯させずに歯ブラシのヘッド等を水洗してください

05

SPEC

仕様

柄の材質:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
毛の材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT樹脂)
毛の硬さ:やわらかめ(ソフト)
耐熱温度:60℃
全長:約191mm(毛丈:約13mm、タフト数:30)
重量:約17.5g
光源:LED(波長領域:405~410nm)
防水性能:IPX7
バッテリー材質:アルカリボタン電池
バッテリー寿命:約100日(※30秒の使用で1日2回)
製造業者:Hertzsteri Biomed Co., Ltd(中国製)
※毛先が開いたらライトのみ使用してください
※バッテリーの交換はできません

SEE CLEAN

歯ブラシのスイッチを押すと
ライトが点灯

※歯から3~5cmの距離を保ってください
※ライトは、スイッチを押し続けている間
点灯し、スイッチを離しますと消灯します

簡単にプラークの付着部位を確認することができます

- シーブラスクリーン アソート 12本入
内容:ピンク、グリーン、パープル、ブルー 各3本
- シーブラスクリーン ピンク 12本入
- シーブラスクリーン グリーン 12本入
- シーブラスクリーン パープル 12本入
- シーブラスクリーン ブルー 12本入

歯科医院様参考価格

各 ¥6,600

- シーブラスクリーン ピンク 1本入
- シーブラスクリーン グリーン 1本入
- シーブラスクリーン パープル 1本入
- シーブラスクリーン ブルー 1本入

歯科医院様参考価格

各 ¥600

1本入 患者様参考価格 各 ¥750

本紙に掲載されている価格は2021年10月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

※本品は医療機器ではありません。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は