

複模型用透明シリコーン印象材

EZ-COPY クリアマトリックス

EZ-COPY クリアマトリックス



内容：
EZ-COPY クリアマトリックス カートリッジ 48mL入 2個
(ベース24mL、キャタリスト 24mL)
ミキシングチップ 6個

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料、歯科咬合採得用材料
一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394120002

透明度が高く、適度な流動性のある
複模型用透明シリコーン印象材です。
透明の印象材のため、注入したフロアブル
コンポジットレジ等を口腔内外にて
光重合することができます。

	口腔内	石膏模型上	シヨアA硬さ	55±2°
操作時間	1分	2分	寸法変化	≤0.6%
硬化時間	3分	4分		




歯科医院様参考価格

¥6,000

充填用ガイドして活用したコンポジットレジン修復に




術前。
右上6 咬合時の疼痛が主訴。
口蓋側咬頭に破折線を確認します。

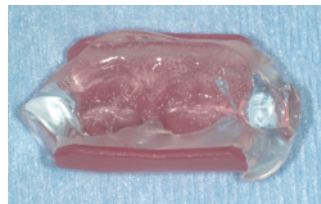


破折片除去前に EZ-COPY
クリアマトリックスを用いて
充填用ガイドを作成します。



破折片を除去します。

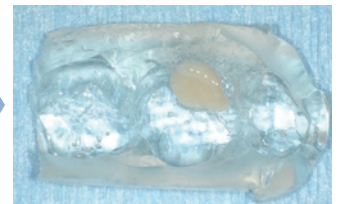

充填用ガイド内にフロアブル
レジンを設置します。

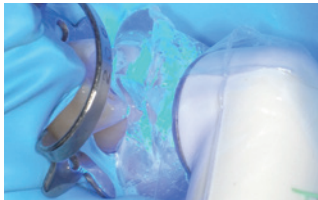

窩洞に圧接して光照射します。



口蓋側咬頭の再建を完了させ
ます。



積層充填操作により咬合面形態
を再構築します。



術後。

臨床写真ご提供：DRC.Hamamatsu 田代歯科医院 田代 浩史 先生

クリアインデックスを使った次世代CR修復例



術前。
右上1の欠損(仮歯が装着されている)
に対するダイレクトブリッジ修復。



3Dプリント診断用模型を作製し、
マルチクリアトレーを試適。



マルチクリアトレーに、
EZ-COPYクリアマトリックスを注入
し、印象採得。



EZ-COPYクリアマトリックスの硬
化後、余剰部分をトリミングし、
試適。



右上1の仮歯を外し、両隣在歯に
接着処理を行う。



クリアインデックスを装着後、切縁
部のホールからフロアブルコンポジ
トレジン注入。



光重合後、クリアインデックスを
取り外し、形態修正、ステイニング、
最終研磨。



術後。

臨床写真ご提供：徳島大学大学院教授 保坂 啓一 先生

硬化時間わずか2分のシリコン系模型材

EZ-COPY ファストンダイ

EZ-COPY ファストンダイ



内容：
EZ-COPY ファストンダイ
カートリッジ 48mL入 2個
(ベース24mL、キャタリスト 24mL)
ミキシングチップ 6個



わずか2分で硬化する

シリコン系模型材です。

チェアサイドにて 模型の作製ができ、
間接法による修復物、マウスガード等の
作製・即日セットが可能です。

操作時間	30秒	ショアA硬さ	85±2°
硬化時間	2分	寸法変化	≤0.4%

歯科医院様参考価格

¥7,200

歯科用樹脂系模型材 一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X10394120003


セミダイレクトでプロビジョナルレストレーション作製



支台歯形成後、印象採得し、
ファストンダイ模型を作製しま
す。



プロビジョナルレストレーシ
ョンは、口腔内でマージンと咬合
を合わせて作製していきます。

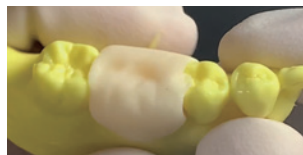

プロビジョナルレストレーシ
ョンをファストンダイに装着し、
口腔内では見えない角度から調
整を行うことができます。




プロビジョナルレストレーシ
ョン完成。セミダイレクトで作製
するため、患者が開口する回数
を大幅に減少できます。

セミダイレクトボンディング



ファストンダイ模型にコンポジ
ットレジンを充填し、形態調整
を行います。

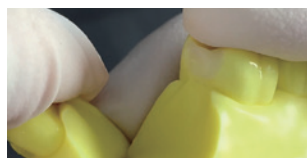

模型は隣接部から容易に分割す
ることができ、隣接マージンの
確認・調整を行うことができ
ます。



模型とレジンの分離も容易です。
最終調整、内面処理後、接着を
行います。



歯間離開不要、少ない咬合調整
で、患者の開口時間を大幅に減
少できます。

臨床写真ご提供：マイスター春日歯科クリニック 遠山 敏成 先生

本紙に掲載されている価格は2026年9月24日のものです。形態・仕様は予告なく変更することができます。