

臼歯部の予備拡大を簡単に！手用ファイル用ハンドル ベンタエンド ユニバーサルエンドハンドル

ご使用中の歯科用ファイル*を装着するハンドルです。
臼歯部でも容易に予備拡大を行うことができ、
術者および患者様の負担を軽減します。



手用ファイルによる予備拡大は、
手指で術野が遮断され、アクセスしにくく、
スムーズな予備拡大が困難で、
手指も疲労します。



ベンタエンド ユニバーサルハンドルは、
根管口の確認を容易にすることができ、
予備拡大しやすく、
時間短縮をすることができます。




ベンタエンド ユニバーサルエンドハンドル

- グレー
- パープル
- シルバー

1本入 歯科医院様参考価格 各 **¥15,000**

※歯科用ファイルは付属されておりません。
※ISO規格の手用ユニバーサルファイルを装着することができます。
※手用ファイルのハンドルの大きさによって装着できない製品もありますので、
ご注意ください。

ベントエンド ユニバーサルエンドハンドルは、
ロータリーファイルご使用前の根管拡大の「クイックスタート」として、
簡便に予備拡大を行うことができる手用ファイル用ハンドルです。

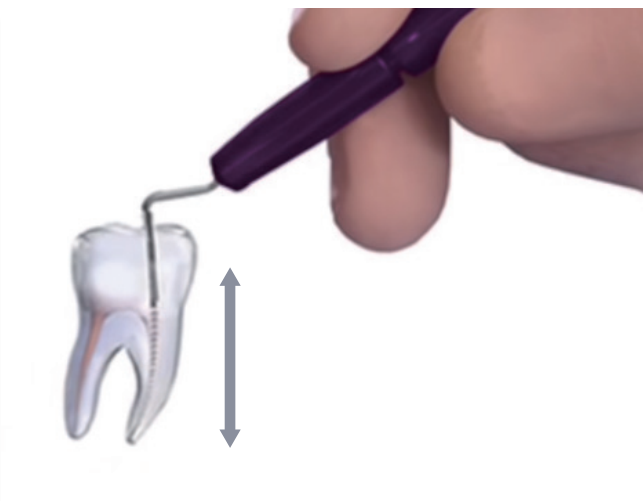

■ネゴシエーション(穿通性の確認)

#08もしくは#10ファイルを挿入し、上下のファイリングを繰り返します。

■グライドパス(予備拡大)

次に#15or#20のファイルを挿入し、上下のファイリングを繰り返します。

●術野を遮断しないロングハンドル設計

マイクロスコープやルーペの使用時に、アクセスが難しい第二大臼歯や開口量が小さい場合でも、根管を目視しながらファイルを挿入し、ファイリングを行うことができます。

●指先の疲労を軽減

従来の手指のファイリングよりも軽い力で効率的にファイリングを行うことができます。

湾曲根管や石灰化根管のネゴシエーションやグライドパスにも使用することができます。

●ご使用の手用ファイルを装着可能

ファイルをハンドルに簡単に装着でき、根管の角度に合わせてファイルを少し曲げることができます。

●オートクレーブ滅菌対応

軽量な陽極酸化アルミニウム製です。

オートクレーブ滅菌対応 (121℃、20 分間以上あるいは 126℃、15 分間以上)。

ご使用例

ベントエンド ユニバーサルハンドルは、ご使用の手用ファイルを装着し、簡便に予備拡大をすることができます。




ISO規格の歯科用ファイルおよびベントエンド ユニバーサルエンドハンドルを準備します。



ハンドル先端部を半時計方向に回転させ、ゆるめます。



歯科用ファイルをハンドルのチャンバー内に装着します。

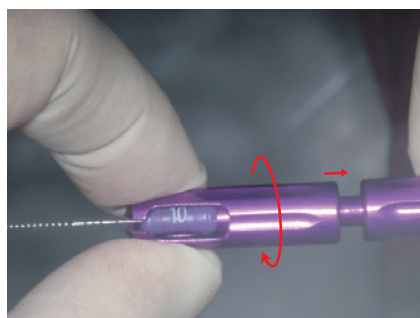

ハンドル先端部を時計方向に回転させ、歯科用ファイルを固定します。



根管に合わせて歯科用ファイルをベンドします。



根管を目視でき、根管にファイルを容易に挿入することができ、予備拡大を簡便に行うことができます。

臨床写真ご提供: 石井 宏先生(石井歯科医院 院長)

本紙に掲載されている価格は2026年6月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は