

歯内療法や歯冠修復時の防湿に!



歯科用ラバーダムシート

Nic Toneラバーダム

ラテックスシート



伸びが良く、
材料離れが良い


- より良い抵抗と伸縮性※ ※伸縮率:600%以上
- 口腔内組織と対照的な美しいカラーバリエーション
- パウダーの使用量が少ないラテックス

Nic Tone ラバーダムシートの選択

- ▶ **Thin**
シン
厚さ:0.15~0.21mm
ミディアム
叢生歯、歯間がきつい場合に
適しています。
- ▶ **Medium**
ミディアム
厚さ:0.22~0.33mm
シック
根管治療や外科処置に
適しています。
- ▶ **Thick**
シック
厚さ:0.34~0.40mm
セメンティング時の歯肉の圧排や、
補綴治療に適しています。

【Nic Tone ラバーダム ラテックスシート ブルー使用例】

臨床写真ご提供:Dr. Victor Guerrero (メキシコ)

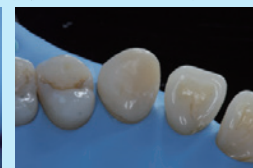

【Nic Tone ラバーダム ラテックスシート ブラック使用例】

臨床写真ご提供:Dr. Victor Guerrero (メキシコ)



Nic-Tone ラバーダム ラテックスシート 6×6インチ 36枚入 歯科医院様参考価格 各 **¥4,500**



- シン・グリーン
- ミディアム・グリーン
- シック・グリーン




- シン・ブルー
- ミディアム・ブルー
- シック・ブルー




- ミディアム・ブラック
- シック・ブラック

※臨床試用医療機器をご用意しております。ご希望の先生はご連絡いただきますようお願い申し上げます。

前歯、単歯、片顎の適切な穿孔位置をラバーダムシートに印記できる
POPでキュートな歯科用ラバーダムテンプレート
PAC-DAM テンプレート

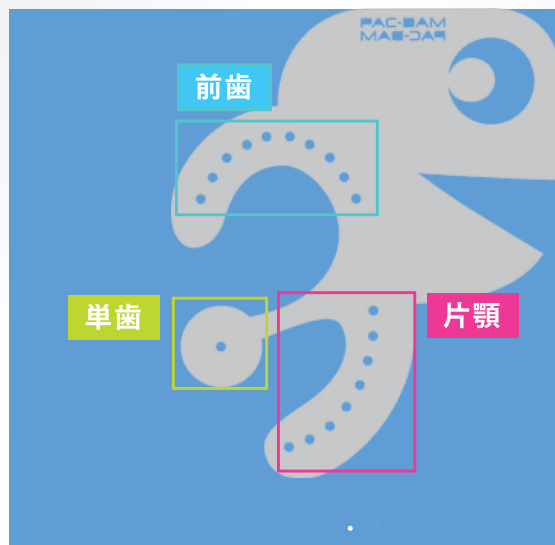

PAC-DAMの穴の直径は2.5mmで
穴間隔は上下顎 2.5 ~ 4mmに設定されています。

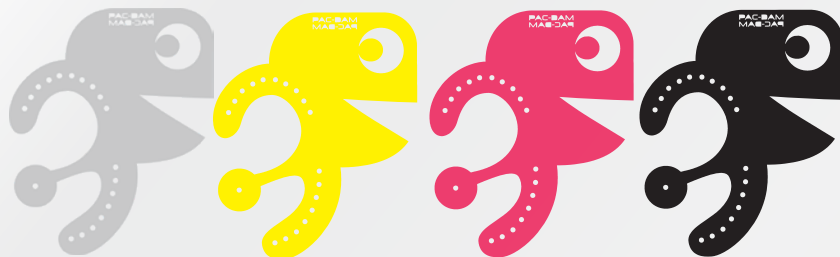

PAC-DAMテンプレート使用後の穿孔



PAC-DAMテンプレートを使用することで、
ラバーダムシートの適切な位置を穿孔することができ、
唾液による汚染を防止することができます。







使用方法

①右図を参考に、ラバーダムシートの
のコーナーに、PAC-DAM テン
プレートのコーナーを合わせます。

- 1: $\frac{5+5}{6} \frac{1 \sim 8}{1 \sim 8}$ シートの右上
- 2: $\frac{5+5}{8 \sim 1} \frac{6}{6}$ シートの左上
- 3: $\frac{5+5}{6} \frac{1 \sim 8}{1 \sim 8}$ シートの右下
- 4: $\frac{5+5}{8 \sim 1} \frac{6}{6}$ シートの左下

②隔離する歯牙の部位を先端の尖っ
た鉛筆やペンで印記します。

③印記した部位をラバーダムパンチ
で穿孔します。

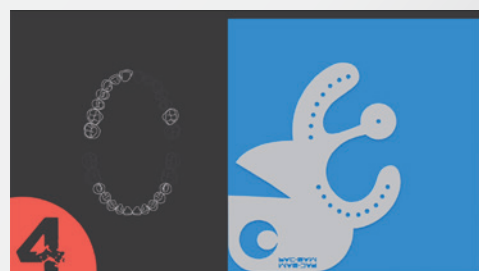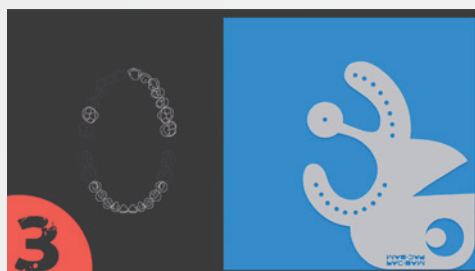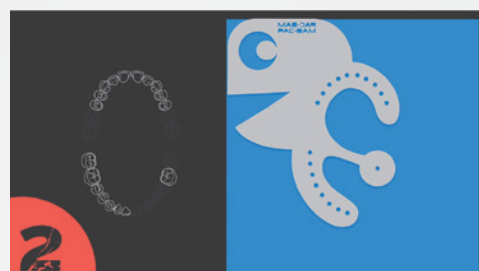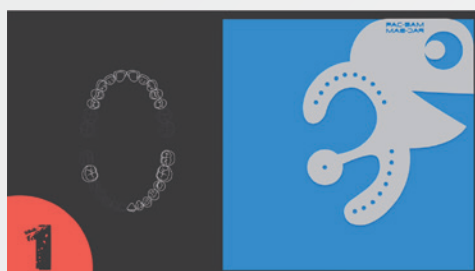


PAC-DAM テンプレート メタル

色調: シルバー

※厚さ: 1mm
重さ: 48g

歯科医院参考価格 **¥8,400**

・PAC-DAM テンプレート メタルは、薬液消毒およびオートクレーブ滅菌
(134℃、4分間)が可能です。

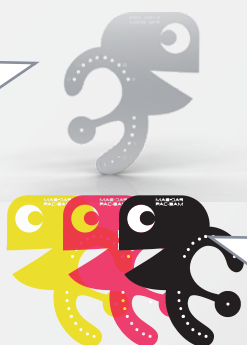

PAC-DAM テンプレート プラスチック

色調: イエロー・ピンク・マットブラック

※厚さ: 3mm
重さ: 22g

歯科医院参考価格 **¥5,600**

・PAC-DAM テンプレート プラスチックは、薬液消毒が可能です。
※薬液消毒を行う場合は、薬液の製造業者の指示に従って消毒を
行ってください。

本紙に掲載されている価格は2026年10月21日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は