



# POP!

Perfect Orthodontic Performance

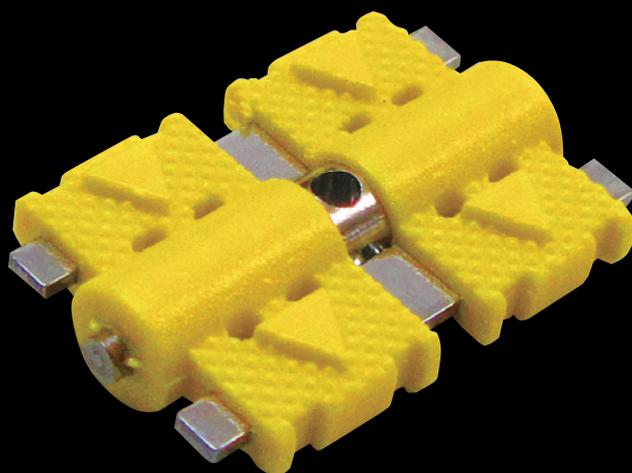

- ネジ山がフラスチックに覆われているため、ネジ山がアクリルレジンに接触しません。
- ネジ山が直接アクリルレジンに接触しないため、レジンを巻き込まず、スクリューの逆回転が起こりません。

柔軟性ある拡大装置の作成に

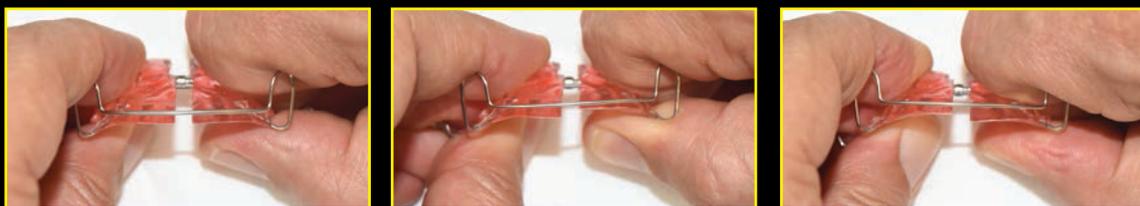

## POPエキスパンションスクリュー



ORTHODONTICS AND IMPLANTOLOGY

歯科医院様参考価格


¥6,000

# POPエキスパンションスクリュー




Orthodontics and Implantology

柔軟性あるスクリューのため、安定した連続的拡大移動が可能で、戻りを防止します。

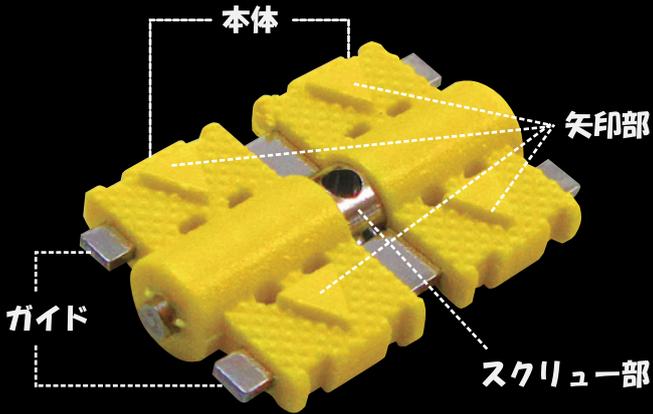

安定した左右対称の連続的拡大移動が可能

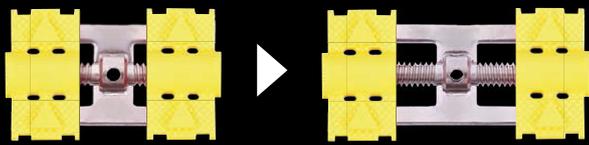

アクチベーション方向を  
識別しやすい矢印部

## ●本体

精密な本体で、安定した連続的拡大移動が可能です。  
柔軟性があるため、装置と口腔内と高い適合性があります。

## ●スクリュー部／ガイド

精密なネジ山のスクリュー部で、左右対称の安定した連続的拡大移動が可能です。  
角型平面ガイドにより、左右対称の拡大移動が可能です。

## ●保持用タブ


保持用タブは、スクリュー部のネジ穴を保護し、矯正用アクリルレジン填入時にレジンとネジ穴との接触を防止します。

装置完成後、保持用タブは2つの部品に分かれ、スクリュー部から容易に取り外すことができます。




## ●矢印部

本体の矢印部はアクチベーション方向を示します。  
保持用タブ上の白い矢印部を切り離し、矢印部の凹みを本体の矢印部のエンボスに被せて、はめ込みますと、アクチベーション方向を識別しやすくなります。

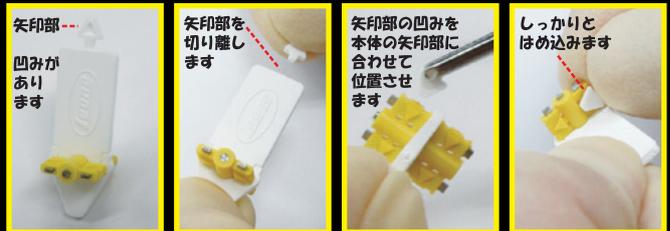

POPエキスパンションスクリューの種類は上顎用とユニバーサルがあり、色はイエローとシルバーがあります。

POPエキスパンションスクリュー(上顎用) 14mm 10個入

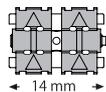

0,8 mm

9 mm





A4805-14G



A4805-14T

POPエキスパンションスクリュー(ユニバーサル) 12mm 10個入

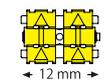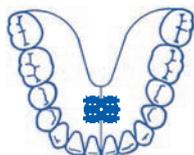

0,7 mm

8 mm



A4800-12G



A4800-12T

管理医療機器 一般名称: 歯列矯正用アタッチメント 医療機器認証番号: 228AGBZX00073000 製造業者: LEONE S.p.A (レオーネ エス・ピー・イー社) 製造国: イタリア  
本紙に掲載されている価格は2016年10月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは  
お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

製造販売業者 EIKO CORPORATION

株式会社エイコー  
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

販売業者 株式会社モリムラ

株式会社モリムラ  
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810  
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は