

術者自身で簡単に調整できる TTLタイプ高精度歯科用ルーペ スキ SUKIサージカルルーペ


3.0×
拡大率



特徴

- ①ほぼ正確な3.0×拡大率を実現した高精度レンズを使用しています。
- ②ガリレアンレンズの特徴である外側縁部の歪みを大幅に無くし、その分、視野径が広くなりました。
- ③術者に適したルーペの左右瞳孔間距離を、術者自身が簡単に調整できます。
※カスタマイズ製品と異なり、製作期間が不要で、製作費用も発生しません。
- ④メガネフレームおよびレンズの総重量が44gと軽量で、長時間使用の疲れを軽減します。
- ⑤ご購入時は矯正無レンズが装着されておりますが、視力に応じて、別売の矯正レンズのみを購入して、術者自身で簡単に交換することができます。
※新しいルーペ本体を購入したり、メーカー側で調整する必要はありません。
※他の術者も矯正レンズを交換することによりご使用いただくことができます。
※矯正レンズの度数は0.5度刻みでご用意しています。(遠視用(+))0.5~6.0度、近視用(-))0.5~6.0度)
- ⑥プロテクトレンズも交換可能のため、キズなどが発生した場合、交換でき、高額な修理費用がかかりません。
- ⑦フレーム(耳に掛かる部分)を術者自身で自由に曲げられ、ストラップなどで固定する必要はありません。

瞳孔間距離を
簡単に調整できます

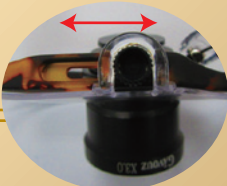

仕様


SUKIサージカルルーペは、レンズから対象物までの作業距離が、420~430mmのW420(フレーム色:ブラック)もしくは370~390mmのW370(フレーム色:ダークトータス)の2種類あります。

2種類	W420	W370
作業距離	420~430mm	370~390mm
フレーム色	ブラック	ダークトータス
拡大視野径	110mm	90mm
倍率	3.0×	
重量	44g	
ルーペアングル	29度	
レンズ等級	Aランク (asphericレンズ)	
焦点深度	60mm	

SUKIサージカルライト

特徴

- ①30,000 LUXの明るさのLEDライトです。
- ②クリップタイプのため、歯科用ルーペに簡単に装着できます。
- ③ライトの角度を調整することができます。
- ④調光はダイヤルを回すだけの簡単操作。充電式です。

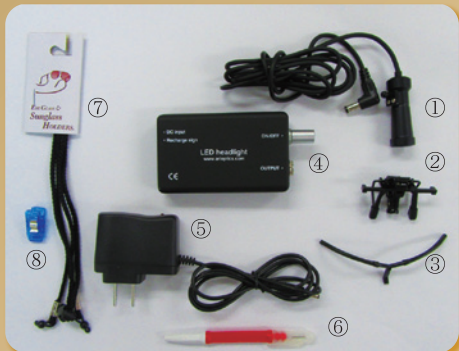

仕様

光源	30,000 LUX	
光源径	W420=	85mm
	W370=	75mm
充電時間	6時間 (満充電)	
照明持続時間	調光	最少 約16時間
		中間 約8時間
		最強 約4時間

SUKIサージカルライト セット 内容

- ①LEDランプ
- ②ヘッドストラップ
- ③アイブローフィックスチャー
- ④チャージャー
- ⑤バッテリー
- ⑥スクレイドライバー
- ⑦ストラップ
- ⑧クリップ

SUKIサージカルルーペ ご注文書 FAX.03-3832-3810

歯科医院様名		ご氏名	
ご住所	〒		
	TEL ()		FAX ()
お取引業者様名			

SUKIサージカルルーペは、レンズから対象物までの作業距離が420~430mmのW420 もしくは 370~390mmのW370の2種類ありますので、ご購入に際し、作業距離:W420 もしくは W370のいずれかをご選択ください。標準装備のフレーム色は、W420はブラック、W370はダークトータスですが、ご注文時にフレーム色をご指定いただくことにより、W420をダークトータス、W370をブラックに変更いただくことができます(フレーム色を変更される場合、納品までにお時間をいただきます)。
矯正レンズへの交換をご希望される場合は、術者が選択した作業距離にて、眼鏡店または眼科等で、視力測定を受け、矯正度数を処方(PRESCRIPTION: Sphere +/-) いただき、SUKIサージカルルーペの矯正レンズ番号を選択し、ご購入ください。
※ SUKIサージカルルーペは、乱視、斜視、老視には対応しておりません。近視用および遠視用の矯正レンズの取り扱いとなります。

上段:矯正度数(度)、下段:SUKIサージカルルーペの矯正レンズ番号

(-) 近視 ←										→ 遠視(+)										
矯正無																				
-6.0	-5.0	-4.0	-3.5	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0	+0.5	+1.0	+1.5	+2.0	+2.5	+3.0	+3.5	+4.0	+5.0	+6.0
#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	#21

※日本の矯正度数は0.25度刻みですが、SUKIサージカルルーペの矯正レンズは0.5度刻みでご用意しておりますので、1ランク下のものをご選択ください。(例:-2.75度 ⇒ -2.5度 = #6。 +1.75度 ⇒ +1.5度 = #14。)

製品名	標準価格	ご注文数
SUKIサージカルルーペセット (矯正レンズ無) W420 (フレーム色: ブラック)	¥98,000	
SUKIサージカルルーペセット (矯正レンズ無) W420 (フレーム色: ダークトータス ※受注発注品)	¥98,000	
SUKIサージカルルーペセット (矯正レンズ無) W370 (フレーム色: ダークトータス)	¥98,000	
SUKIサージカルルーペセット (矯正レンズ無) W370 (フレーム色: ブラック ※受注発注品)	¥98,000	
SUKIサージカルルーペ 矯正レンズ ※矯正レンズをご購入される場合は矯正レンズ番号をご記入ください。 右眼(OD) (#)	¥8,000	
SUKIサージカルルーペ 矯正レンズ ※矯正レンズをご購入される場合は矯正レンズ番号をご記入ください。 左眼(OS) (#)	¥8,000	
SUKIサージカルルーペ プロテクトレンズ (左右各2枚入=2組)	¥5,000	
SUKIサージカルルーペ メガネフレーム (ブラック)	¥9,800	
SUKIサージカルルーペ メガネフレーム (ダークトータス)	¥9,800	
SUKIサージカルライト セット	¥47,000	

SUKIサージカルルーペ 一般医療機器 製造販売届出番号: 13B3X00232100011 SUKIサージカルライト 一般医療機器 製造販売届出番号: 13B3X00232100010
本紙に掲載されている価格は2016年9月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

●製品に関するお問い合わせは



〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10 TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810

株式会社フロンティアデンタル 製造販売業者名: デンタルフォーラム

〒111-0032 東京都台東区浅草 5-8-3 オザキビル 2F Tel:03-6240-6158

●製品に関するご用命は