

セラセム 8g



内容：
 ・セラセム 8g（ベース／キャタリスト 各4g）……………1本
 ・デュアルシリンジミキシングチップ（ミックス用チップ、口腔内用チップ、根管用チップ）……………各15個

歯科医院様参考価格 ￥12,000

デュアルシリンジミキシングチップ

スタティックチップ 30個入	口腔内用チップ 30個入	根管内用チップ 30個入
		
内容： ・スタティックチップ ……30個	内容： ・ミックス用チップ ……30個 ・口腔内用チップ ……30個	内容： ・ミックス用チップ ……30個 ・根管用チップ ……30個
歯科医院様参考価格 ￥3,450	歯科医院様参考価格 ￥5,400	歯科医院様参考価格 ￥5,400

オールボンドユニバーサル



内容：
 ・オールボンドユニバーサル 6mL……1本

歯科医院様参考価格 ￥12,500

ポーセレンプライマー10mL



内容：
 ・ポーセレンプライマー 10mL……………1本

歯科医院様参考価格 ￥4,800


Zプライムプラス 4mL



内容：
 ・Zプライムプラス 4mL……………1本

歯科医院様参考価格 ￥12,500

ビスコポーセレンエッチャント（9.5%フッ化水素酸）

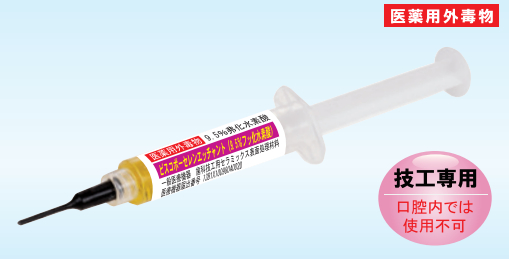

内容：
 ・ビスコポーセレンエッチャント（9.5%フッ化水素酸）5g入 シリンジ ……1本
 ・シリンジチップ（ブラック プラスチック）……………25本

歯科医院様参考価格 ￥4,000

関連製品


マイクロエッチャーII A



●マイクロエッチャーII A
歯科医院様参考価格 ￥69,000

●マイクロエッチャーII Aブローキット
歯科医院様参考価格 ￥75,000

ブレップシュアII

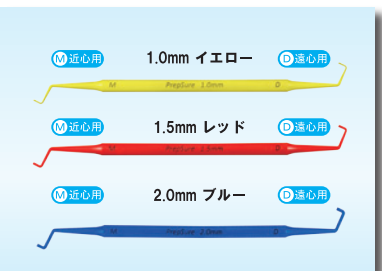

●アソートキット 3本入
 内容：1.0mm、1.5mm、2.0mm……………各1本入

●1.0mm イエロー 3本入
 ●1.5mm レッド 3本入
 ●2.0mm ブルー 3本入
歯科医院様参考価格 各 ￥9,900

●1.0mm イエロー 1本入
 ●1.5mm レッド 1本入
 ●2.0mm ブルー 1本入
歯科医院様参考価格 各 ￥3,500

コンタックEZ 修復用ストリップ



●アソート5個入（5種類×1個入）
 内容：ブラック、オレンジ、ホワイト、ブルー、グレー…各1個入

●ブラック 5個入
 ●オレンジ 5個入
 ●ホワイト 5個入
 ●ブルー 5個入
 ●グレー 5個入

歯科医院様参考価格 各 ￥4,500

セラセム：医療機器認証番号：229AGBZX00048000 管理医療機器	デュアルシリンジミキシングチップ：医療機器届出番号13B1X10098040013 一般医療機器
オールボンドユニバーサル：医療機器認証番号：225AGBZX00057000 管理医療機器	オールボンド オペーカー／C&B（ポーセレンプライマー）：医療機器承認番号：20400BZY00760000 管理医療機器
Zプライムプラス：医療機器認証番号222AGBZX00157000 管理医療機器	ビスコポーセレンエッチャント（9.5%フッ化水素酸）：医療機器届出番号：13B1X10098040020 一般医療機器
マイクロエッチャーII A：医療機器届出番号：13B1X10098010025 一般医療機器	コンタックEZ（修復用ストリップ）：医療機器届出番号：13B1X10098130001 一般医療機器

本紙に掲載されている価格は2018年2月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは
お客様窓口フリーダイヤル ➡ **TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020**

製造販売業者  **株式会社エイコー**
 〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
 TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

販売業者  **株式会社モリムラ**
 〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
 TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は

セラ Thera シリーズ 第2弾 BISCO



歯科用覆髄材料
 セラカルLCの特徴を活かし、
MTA系レジンセメントとして
 開発されたセラセム。

MTA系デュアルキュア型レジンセメント セラセム

MTA系

前処理不要

ジルコニア
 接着に



ジルコニア

アルミナ

二ケイ酸リチウム

メタル

歯質

ジルコニア接着に！ カルシウムイオンおよびフッ化物イオン徐放性デュアルキュア型レジンセメント

セラセム

MTA系



前処理不要

間接修復物、根管ポスト等の接着にご使用いただける
前処理不要のシリンジタイプのデュアルキュア型レジンセメントです。



1 MTA系セメント、フッ化ナトリウム配合

間接修復物の長期的耐久性を維持させるためには、間接修復物と歯質との間の微小漏洩を抑制し、二次カリエスの発生を防止することが重要です。
セラセムは、MTA系のポルトランドセメントおよびフッ化ナトリウムを配合していますので、カルシウムイオン&フッ化物イオンをリリース&リチャージすることができ、歯質に結晶体を形成して、細菌の侵入を抑制します。

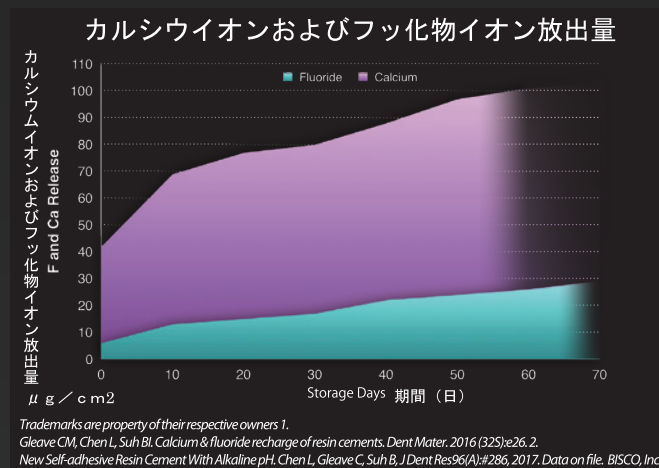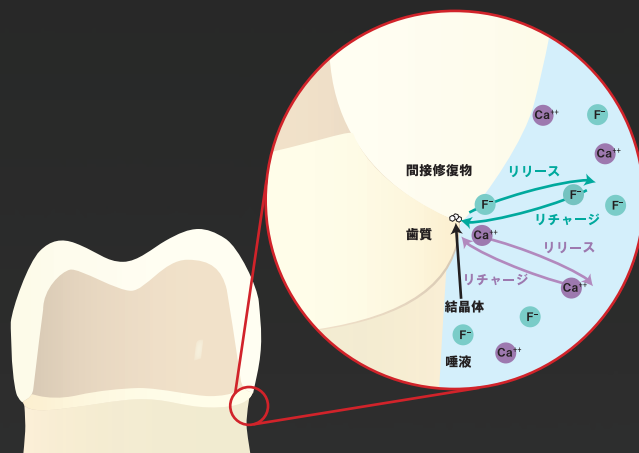


2 MDPモノマー配合 ジルコニアなどの間接修復物に強い接着強さ

ジルコニア、チタン、ステンレススチールなどの歯科材料に強い接着強さを実現します。
適用後、数分で酸性からアルカリ性のpHに移行（重合30分後にはpH10に到達）するため、酸産生菌が生育しにくい環境をつくります。

物理的特性

- ・操作時間：1分以上（練和時間含む）
- ・硬化時間（光重合）：20～30秒間
（照射条件：有効波長域400～550nm、照射強度500mW/cm²）
- ・硬化時間（化学重合）：5分以下（37℃）
- ・被膜厚さ：24 μm
- ・X線造影性

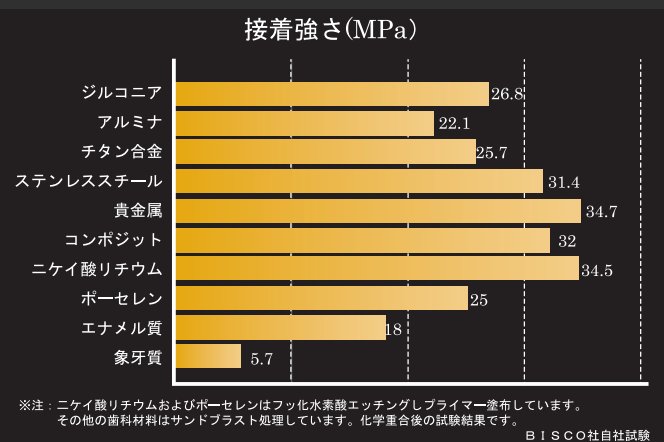


3 容易な余剰セメント除去

前処理不要のオートミックスタイプのデュアルシリンジのため、ペーストを押し出すだけで、即時に均一なセメント混和および適用が可能です。
余剰セメントを迅速・容易に除去できるように成分を配合しています。



ジルコニア修復物へのご使用例

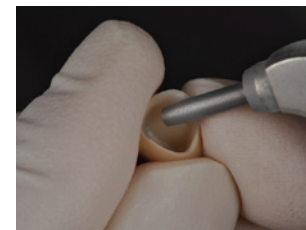

間接修復物の被着面にサンドブラスト処理をします。



支台歯を清掃します。



セラセムを押し出し、被着面に適用します。



間接修復物を歯牙に装着します。



辺縁部を2～3秒間光照射（照射強度500mW/cm²）します。



余剰セメントを除去します。




20～30秒間光照射（照射強度500mW/cm²）します。



術後。

臨床写真ご提供：新百合ヶ丘南歯科 高山 祐輔 先生

ニッケイ酸リチウム修復物へのご使用例

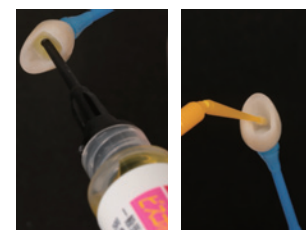

間接修復物の被着面をフッ化水素酸処理し、水洗、乾燥後、ポーセレンプライマーを塗布します。



支台歯のサンドブラスト処理をします。



セラセムを押し出し、被着面に適用します。



間接修復物を歯牙に装着し、辺縁部を2～3秒間光照射（照射強度500mW/cm²）します。



辺縁部の余剰セメントを除去します。



隣接面の余剰セメントをコンタックEZで除去します。



20～30秒間光照射（照射強度500mW/cm²）します。



術後。

臨床写真ご提供：さだきデンタルクリニック 坂本 貞樹 先生

メタルクラウンへのご使用例



支台歯の清掃後。



修復物の被着面にサンドブラスト処理をします。



セラセムを押し出し、被着面に適用します。



間接修復物を歯牙に装着します。



辺縁部を2～3秒間光照射（照射強度500mW/cm²）します。



余剰セメントを除去します。



化学重合後。



術後。

臨床写真ご提供：Bright Dental Clinic 河野 慶吾 先生