DentiAnn

セーブシリンジ

SEIL GLOBAL

片手でラクラク　精密印象採得に！
シリコーン印象材の
無駄を削減！

最大 70% 節約




シリンジ容量：1.5mL　シリンジ全長：99.6mm

内容：シリンジ10本、ミキシングチップ100個、オーラルチップ100個

歯科医院様参考価格　¥6,600

01 ミキシングチップ内の歯科材料の削減に

- セーブシリンジミキシングチップ内に残留する歯科材料の無駄を、通常のミキシングチップより、最大70%削減させることができます。

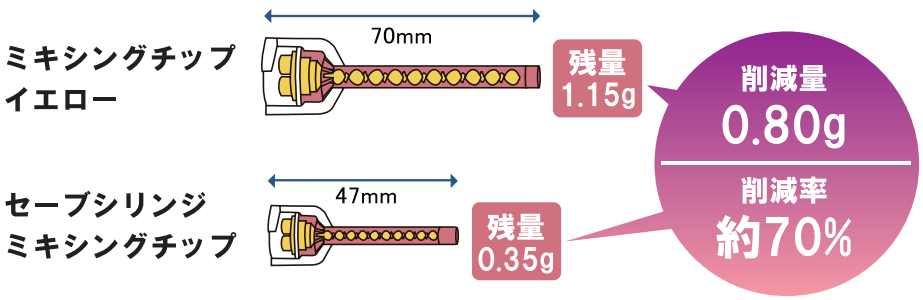



02 カートリッジタイプ印象材に接続可能

- カートリッジタイプ（50mL）のシリコーン印象材（ライトボディ）等に使用できます。
- スリムサイズシリンジのため、口腔内へのアクセスが容易です。
- 簡便に精密印象を行うことができます。

一般医療機器　歯科用練成器具　医療機器届出番号13B1X10394240002

セーブシリンジ　ご使用方法


Instruction for Use Video



カートリッジタイプの歯科材料のベースとキャタリストペーストが均等に出るまで、少量の試し出しを行います。
カートリッジ先端部を拭掃します。




カートリッジ先端部をセーブシリンジにしっかりと合わせ、歯科材料の必要量を装填します。
歯科材料を最大装填する場合は、シリンジのスペースを約2割残してペーストを装填してください。

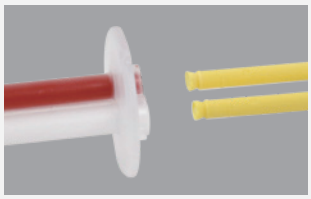


プランジャーをセーブシリンジに差し込み、歯科材料をゆっくりと押します。




シリンジから歯科材料の試し出しを行います。
シリンジ先端部を拭掃します。

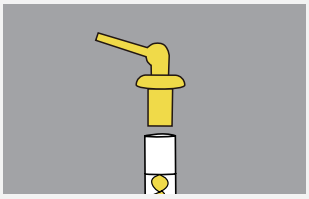


必要に応じて、ミキシングチップ先端にオーラルチップを装着します。

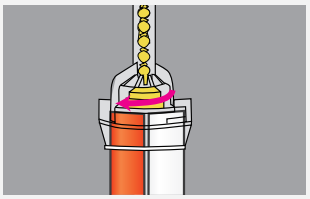

ミキシングチップをシリンジに合わせて、時計方向に90°に回転させますと、固定します。

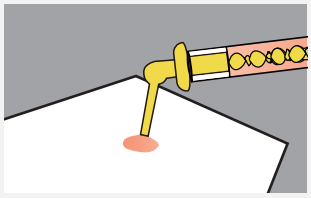

ミキシングパット上に歯科材料をゆっくりと押し出し、歯科材料の試し出しを行います。

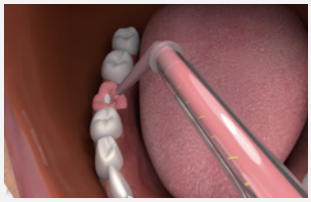


適用部位にオーラルチップを適用させ、歯科材料の注入あるいは印象採得を行います。

※本品は、カートリッジタイプの歯科用ゴム質弾性印象材（混和比1：1）粘度の区分　タイプ３：低粘度（主としてシリンジ注入にて使用するもの）、歯科用樹脂系模型材等に使用する歯科用ミキシングシリンジ です。
※本品のご使用に際しまして、予めご使用の歯科材料の試し出しを行って、練和不良の場合には本品のご使用をお避けください。

セイルグローバル ミキシングチップ

各メーカーのカートリッジタイプ（50mL）の印象材、咬合採得材等用のミキシングチップです。

L グリーン

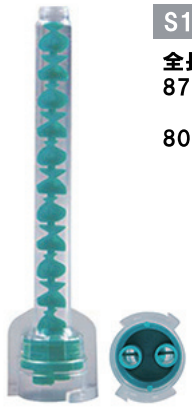

S131
全長 87mm
80本入

歯科医院様参考価格
¥2,600

S ピンク



S132
全長 80mm
80本入

歯科医院様参考価格
¥2,600

SS イエロー



S130
全長 70mm
80本入

歯科医院様参考価格
¥2,600

SSS ブルー



S133
全長 57mm
80本入

歯科医院様参考価格
¥2,600

オーラルチップSS・イエロー



S115
100個入

ミキシングチップ SS イエロー（S130）用。
歯科医院様参考価格
¥1,000

オーラルチップS・ホワイト



S116
100個入

ミキシングチップ S ピンク（S132）用。
歯科医院様参考価格
¥1,000

バイトチップ



S122
50個入

ミキシングチップ L グリーン（S131）用。
歯科医院様参考価格
¥1,350

チップは単回使用です。

一般医療機器　歯科用練成器具、歯科用注入器具、　医療機器届出番号13B1X10394240001　製造業者：SEILGLOBAL CO.,LTD.（セイルグローバル社）　製造国：大韓民国

本紙に掲載されている価格は2026年10月21日のものです。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

MORIMURA
株式会社 モリムラ
〒110-0005　東京都台東区上野3-17-10
TEL 03-5808-9350　FAX 03-5808-9351
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は

2061002.1000